

INWAY® Blasenkatheter Set

Das INWAY® Blasenkatheter Set beinhaltet alle Komponenten zur hygienischen Anlage bzw. zum hygienischen Wechsel eines transurethralen Blasenkatheters.

Ansicht



Vorteile

Für Frauen und Männer

Das Set beinhaltet ein Breitband-Antiseptikum zur Schleimhautdesinfektion (Octenisept®) und Katheter-Gleitgel (Endosgel®), wodurch das INWAY® Blasenkatheter Set universell einsetzbar ist.

Sicheres Blocken

Um ein schleichendes Entblocken des Katheter-Ballons durch Diffusion zu vermeiden, enthält das Set 10%ige Glycerin-Lösung zum Blocken.

Details

Inhalt in unsteriler Außenverpackung (PE-Flachbeutel)

- › 6 ml Endosgel®
- › 15 ml Octenisept®
- › 10-ml-Luer-Einmalspritze zum Entblocken

Inhalt in steriler, wasserfester Unterlage (60 x 60 cm) verpackt

- › 3-teilige Plastikschale
- › Vorgefüllt: 10%ige Glycerin-Lösung in 10-ml-Luer-Einmalspritze
- › 2 Latex-Handschuhe, medium, puderfrei
- › 5 Schlingentupfer pflaumengroß, 20 x 20 cm
- › 1 Pinzette
- › Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm

Bestelldaten

INWAY® Blasenkatheter Set

| REF | PZN | VPE |
|--------|----------|-----|
| 081002 | 09187885 | 1 |

Geschlossene Urindrainagesysteme

Geschlossene Urindrainagesysteme verfügen über eine Tropfkammer zwischen Zuleitungsschlauch und Urinbeutel. Dadurch bildet der Blasenkatheter samt Zuleitungsschlauch ein vom Urinbeutel getrenntes System. Aufsteigende Infektion können so effektiv verhindert werden.

Weitere Merkmale der geschlossenen Urindrainagesysteme von pfm medical, die den hygienischen Anforderungen des Robert Koch-Instituts entsprechen, sind:

- Nadelfreie Probenentnahmestelle
- Rückflusssperre
- Druckausgleichsventile mit Mikrofilter in Tropfkammer und Urinbeutel
- Hygienischer Bodenauslass

Durch den Einsatz geschlossener Urindrainagesysteme kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden.

INWAY® Tag & Nacht

Der 1.000 ml fassende INWAY® Tag & Nacht wurde für den mobilen Katheter-Träger entwickelt: tagsüber wird er als Beinbeutel getragen, nachts wird er als Bettbeutel genutzt. Dabei überzeugt er durch einfachen Gebrauch und hohe Sicherheit.

Ansicht



Vorteile

Tag- und Nacht-Gebrauch

Tagsüber kann der INWAY® Tag & Nacht mit einem Kletthalteband als Beinbeutel getragen werden. Nachts kann er am Bett fixiert und als Bettbeutel genutzt werden. Am Sicherheits-Ablass kann ohne Adapter ein Urinbeutel angeschlossen werden.

Anwenderfreundlich

Der INWAY® Tag & Nacht Urinbeutel verfügt über einen Sicherheits-Ablass. Dieser verhindert effektiv ein Nachtropfen des Urins und ist dank seines großen Hebels besonders leicht zu bedienen. Das Soft-Design des INWAY® Tag & Nacht ohne scharfe Kanten vereinfacht den alltäglichen Gebrauch.

Hygienisch

Die Tag & Nacht-Nutzung vermeidet Diskonnektionen am Katheter. Zudem verfügt der INWAY® Tag & Nacht über eine Tropfkammer, eine Rückflusssperre, je einen Mikrofilter in Tropfkammer und Urinbeutel sowie über eine nadelfreie Probenentnahmestelle.

Details

- Sicherheits-Ablass in belüfteter Tasche (Dockhouse)
- Stufenkonnektor mit integrierter, nadelfreier Probenentnahmestelle
- Beflockung der Rückseite mit widerstandsfähiger, schweißaufsaugender Viskose
- Integrierte Kordel zur Befestigung am Bett
- Einzeln steril (Ethylenoxid) verpackt

Individuell

Der Drainageschlauch des INWAY® Tag & Nacht ist individuell kürzbar. Dazu liegen den 90- und 60-cm-Varianten separate Katheter-Konnektoren bei.

Bestelldaten

INWAY® Tag & Nacht; HMV-Nr. 15.25.07.1008

| REF | Volumen | Schlauch | PZN | VPE |
|-----------|----------|----------------------|----------|-----|
| P02020001 | 1.000 ml | 30 cm, nicht kürzbar | 09315395 | 1 |
| P02020002 | 1.000 ml | 60 cm, kürzbar | 09315389 | 1 |
| P02020003 | 1.000 ml | 90 cm, kürzbar | 09315372 | 1 |

pfm Kletthalteband

Das hochwertige, gepolsterte pfm Kletthalteband wurde speziell für den CareLine™ Beinbeutel entwickelt. Es ist besonders angenehm zu tragen und überzeugt gleichzeitig durch seine lange Haltbarkeit.

Ansicht



Vorteile

Sehr hoher Tragekomfort

Das hautfreundliche, gepolsterte Material des in 4 Größen erhältlichen pfm Kletthaltebandes sorgt für komfortablen Sitz. Breite, elastische Bänder verhindern Einschnürungen am Oberschenkel.

Lange Haltbarkeit

Das pfm Kletthalteband ist sehr hochwertig verarbeitet. Die verwendeten Materialien und die maschinelle Waschbarkeit (bis 40°C) garantieren eine lange Haltbarkeit.

Sicherer Sitz

Innenliegende Klettbander halten den Beinbeutel und verhindern sein seitliches Verrutschen. Eine Silikonauflage auf der Innenseite sorgt für sicheren Halt auf der Haut.

Details

- › Empfehlung: paarweise Verwendung bei großen Beinbeuteln zur oberen und unteren Fixierung des Beinbeutels
- › Bis 40°C waschbar
- › Latexfrei

Bestelldaten

pfm Kletthalteband; HMV-Nr. 15.99.99.0008

| REF | Länge | PZN | VPE |
|--------|------------|----------|-----|
| 1713S | 38 - 42 cm | 00012598 | 1 |
| 1714M | 44 - 53 cm | 00045592 | 1 |
| 1715L | 55 - 65 cm | 00045600 | 1 |
| 1716XL | 67 - 90 cm | 00045617 | 1 |

Katheterventile und –stopfen

Vorteile

Sicher hygienisch

Blasenkatheter und Katheterventil bilden ein geschlossenes System, das im Vergleich zu Katheterstopfen eine deutlich geringere Infektionsgefahr aufweist.

Training für die Blase

Der Patient kann seinen gewohnten Miktions-Rhythmus fortführen. Dem Verlust der Blasenkapazität wird so auf natürliche Art und Weise entgegengewirkt.

Erholsamer Schlaf

Durch den Anschluss eines Urinbeutels an die Katheterventile Stäubli KV 200 EH oder CareVent® müssen Patienten nachts nicht mehr zum Urinlassen aufstehen und können durchschlafen.


Details

- Exakter Öffnungs- und Verschlussmechanismus
- Einzel steril (Ethylenoxid) verpackt
- Einfache Desinfektion

Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200

Das automatisch schließende Katheterventil KV 200 EH wird komfortabel mit einer Hand bedient und ermöglicht so einen diskreten Alltagsgebrauch. Mit dem Kupplungsstück KP 200 kann ein Urinbeutel konnektiert werden.

Ansicht

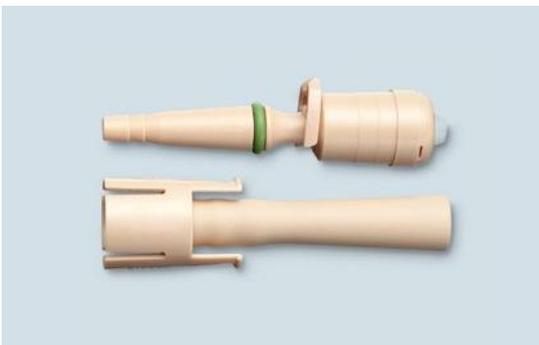

Bestelldaten

Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200; HMV-Nr.

| REF | Beschreibung | PZN | VPE |
|-----------|------------------------|----------|-----|
| KV 200 EH | Ventil einzeln | 04608483 | 1 |
| KP 200 | Kupplungsstück einzeln | 00189799 | 1 |

Stäubli Katheterventil KV 100 EH

Das automatisch schließende Katheterventil KV 100 EH wird komfortabel mit einer Hand bedient und ermöglicht so einen diskreten Alltagsgebrauch. Der Anschluss eines Urinbeutels ist nicht möglich.

Ansicht



Bestelldaten

Stäubli Katheterventil KV 100 EH; HMV-Nr. 15.25.16.0001

| REF | PZN | VPE |
|-----------|----------|-----|
| KV 100 EH | 00189782 | 1 |

CareVent® Katheterventil

Das robuste CareVent® Katheterventil mit patentiertem Verschlussmechanismus wird mit einem Kupplungsstück zum Anschluss eines Urinbeutels geliefert.

Ansicht



Bestelldaten

CareVent® Katheterventil; HMV-Nr. 15.25.16.0019

| REF | PZN | VPE |
|---------|----------|-----|
| CV 1001 | 04608508 | 1 |

Spigot Katheterstopfen

Mit dem Katheterstopfen werden Blasenkatheter sicher verschlossen.

Ansicht



Bestelldaten

Spigot Katheterstopfen; HMV-Nr. 15.25.15.4000

| REF | PZN | VPE |
|-------|----------|-----|
| 40002 | 03402839 | 50 |

BETTBEUTEL S-BAG & P-BAG

Mit unseren geschlossenen Urindrainagesystemen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Prophylaxe von Harnwegsinfektionen: Alle unsere Beutelsysteme sind besonders hochwertig produziert, einfach zu handhaben und erfüllen sämtliche Voraussetzungen für eine hygienisch-sichere Urindrainage.

Die Bettbeutel S-Bag und P-Bag bieten gleich mehrere Vorteile: Beide Systeme eignen sich für Langzeitanwendungen – S-Bag für Erwachsene (Fassungsvermögen 2.000 ml) und P-Bag für Kinder (Fassungsvermögen 1.000 ml).

Beide Systeme verfügen über einen **Universalstufenkonnektor**, der sich sicher mit dem Katheter verbinden lässt. Am Konnektor befindet sich außerdem eine **nadelfreie Urinprobeentnahmestelle**. So werden Nadelstichverletzungen verhindert und die Gefahr eindringender Keime effektiv reduziert. S-Bag und P-Bag sind jeweils mit einem **flexiblen und dennoch knickstabilen Schlauch** ausgestattet, der mit der integrierten **Bettstuchklammer** sicher befestigt werden kann. Die Schiebeklemme am Schlauch erleichtert die Urinprobeentnahme. Die **belüftete Tropfkammer mit integriertem Rückflussventil** unterbricht den Urinfluss und verhindert das Zurückfließen des Urins. Somit bietet sie einen wirksamen Schutz vor aufsteigenden Harnwegsinfektionen. Eine **zusätzliche bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung** sorgt für optimalen Druckausgleich im Beutel und zuverlässige Abflussleistung. Beide Systeme sind mit einer deutlichen ml-Graduierung versehen, die das Ablesen der ausgeschiedenen Harnmenge ermöglicht. Das **nachtropfsichere Bodenablassventil mit Einhandklemme** sorgt für ein hygienisches und schnelles Entleeren des Beutels. Dank des »Doghouse«-Halters kann der Ablassschlauch sicher fixiert werden. So wird eine Kontamination der Umgebung mit Urintröpfchen verhindert und zusätzliche Bodenfreiheit geschaffen. Die Urindrainagesysteme sind beide mit einem stabilen Doppelhaken und einer zusätzlichen Kordel versehen. So können sie in jeder Situation sicher befestigt werden.

S-Bag und P-Bag sind komplett latexfrei und eignen sich deshalb auch für Patienten mit einer Latexallergie.



Schiebeklemme

S-BAG

Steriles Einmalprodukt


| SCHLAUCH | FASSUNGSVERMÖGEN | ARTIKELNR | PZN | HMV-NR | VE |
|----------|------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 120 cm | 2.000 ml | 850414 | 00123725 | 15.25.07.0049 | 20 |

P-BAG FÜR KINDER

Steriles Einmalprodukt

| SCHLAUCH | FASSUNGSVERMÖGEN | ARTIKELNR | PZN | HMV-NR | VE |
|----------|------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 90 cm | 1.000 ml | 673052 | 00123725 | 15.25.07.0049 | 20 |

BEINBEUTEL & DREI-KAMMER BEINBEUTEL

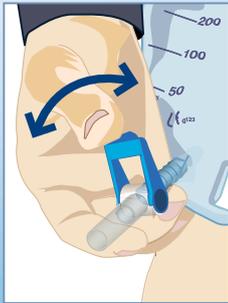

Beinbeutel – 750 ml

Das sichere Flip-Flow Ablassventil kann einfach mit einer Hand bedient werden.



Drei-Kammer Beinbeutel – 500 ml



Fädeln Sie die Haltebänder jeweils so ein, dass die Silikon-Haftstreifen auf der Beuterrückseite verlaufen.

Unsere Beinbeutel überzeugen durch ihr hohes Fassungsvermögen von 750 ml.

Unsere Drei-Kammer Beinbeutel besitzen ein Fassungsvermögen von 500 ml, bieten aber aufgrund ihrer speziellen Bauweise einen besonderen Tragekomfort: Sie sind in drei miteinander verbundene Auffangkammern unterteilt, die sich gleichmäßig und geräuschlos füllen. Der positive Effekt des Drei-Kammer-Systems: der Beutel trägt unter der Kleidung, auch in gefülltem Zustand, kaum auf. Ein Hin- und Herschwappen des Urins, insbesondere beim Gehen, wird vermieden.

Beiden Systemen sind folgende Vorteile gemeinsam: Die Systeme verfügen alle über einen Universalstufenkonnektor, durch welchen sie sicher mit dem Katheter verbunden werden können. Dem Anwender steht am Konnektor außerdem eine **nadelfreie Urinprobenentnahmestelle** zur Verfügung (nicht bei Art. Nr. 850353), die Nadelstichverletzungen verhindert und die Gefahr eindringender Keime reduziert. Alle Beinbeutel sind mit einem **flexiblen und dennoch knickstabilen Schlauch** ausgestattet. Je nach Bedarf stehen jeweils mehrere Schlauchlängen zur Verfügung. Jeder Beinbeutel besitzt ein **Rückflussventil**, das ein Zurückfließen des Urins verhindert und somit hilft, vor Harnwegsinfektionen zu schützen. Die Beinbeutel sind mit einer deutlichen ml-Graduierung versehen und besitzen eine **hautfreundliche, weiche Beuterrückseite**, die vor Hautirritationen schützt. Sowohl die Beinbeutel als auch die Drei-Kammer Beinbeutel verfügen über ein **nachtropfsicheres Flip-Flow Ablassventil**, das mit nur einer Hand bedient werden kann. Alle Beinbeutel sind komplett latexfrei.

Jede Verpackungseinheit an Beinbeuteln beinhaltet zudem 2 Velcro-Haltebänder mit Silikon-Haftstreifen auf ihrer Rückseite, die den Beutel sicher am Bein fixieren.



Universalstufenkonnektor



Mit Hilfe einer Luer-Spritze ohne Nadel ist es einfach, Urinproben am **Universalstufenkonnektor** zu entnehmen.

BEINBEUTEL

Flip-Flow Ablassventil, mit 2 Velcro-Haltebändern/VE, steriles Einmalprodukt

| SCHLAUCH | FASSUNGSVERMÖGEN | ARTIKELNR | PZN | HMV-NR | VE |
|----------|------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 10 cm | 750 ml | 850339 | 05140869 | 15.25.05.3074 | 10 |
| 30 cm | 750 ml | 850341 | 05140906 | 15.25.05.3074 | 10 |

DREI-KAMMER BEINBEUTEL

Flip-Flow Ablassventil, mit 2 Velcro-Haltebändern/VE, steriles Einmalprodukt

| SCHLAUCH | FASSUNGSVERMÖGEN | ARTIKELNR | PZN | HMV-NR | VE |
|----------|------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 10 cm | 500 ml | 850356 | 07520004 | 15.25.05.3069 | 10 |
| 30 cm | 500 ml | 850355 | 07519917 | 15.25.05.3069 | 10 |
| 45 cm | 500 ml | 850353* | 07791022 | 15.25.05.3069 | 10 |

* Kürzbarer Schlauch:

Der Schlauch des Beutels kann je nach Bedarf gekürzt werden.

DREI-KAMMER BEINBEUTEL

Flip-Flow Ablassventil, mit 2 Velcro-Haltebändern/VE, unsteriles Einmalprodukt

| SCHLAUCH | FASSUNGSVERMÖGEN | ARTIKELNR | PZN | HMV-NR | VE |
|----------|------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 45 cm | 500 ml | 850357* | 07520027 | 15.25.05.3069 | 10 |

* Schlauch nicht kürzbar

Achtung: Unsterile Urinbeutel sollten nicht an sterile Katheter jeglicher Art angeschlossen werden. Unsterile Urinbeutel dürfen nur an unsterile Drainagesysteme (z. B. Urinalkondome) konnektiert werden.

Conveen Mehrkammer Beinbeutel



| Artikel Nr. | Volumen | Schlauchlänge | VE |
|-------------|---------|---------------|----------|
| 5171 | 600 ml | 45 cm kürzbar | 10 Stück |
| 5177 | 800 ml | 65 cm kürzbar | 10 Stück |

- Der flache Klappverschluss sorgt für Diskretion und ist intuitiv zu bedienen
- Einfach zu bedienender Ablasshebel
- Für den angenehmen Tragekomfort sorgt ein weiches Vlies auf der Rückseite.
- Knicksichere Schläuche verhindern einen Urinreflux und Leckagen.
- Frei von PVC und Phthalaten (Weichmachern)
- Optionale nadelfreie Entnahmestelle (einzigartig), ermöglicht die gefahrlose Harnprobengewinnung.
- Verlängerter Ablassschlauch verhindert bei der Beutellentleerung den Kontakt mit Urin
- Diskretes und modernes Design
- Der Beutel ist aufgrund seiner Farbgebung unter der Kleidung kaum sichtbar.

Beinbeutel-Halterung


Freedom Beinlinge Beinbeutel-Halterung mit integrierter Beuteltasche aus Polyester, waschbar bis 60°C.



| Artikel-Nr. | Länge | Größe | Packungs-Einheit |
|-------------|-------|--------|------------------|
| 465-91158 | 30-45 | Small | 5 |
| 465-91258 | 45-65 | Medium | 5 |
| 465-91359 | 55-80 | Large | 5 |

Klettband

Zur Befestigung von Conveen Beinbeuteln. Passend für jeden Beinumfang. Waschbar bis 60°C. Klettverschluss und Knöpfe für Bein- und Mehrkammer-Beinbeutel.

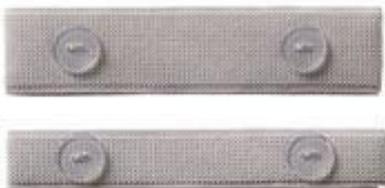

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. 50501 | VE = 10 Stück |
|----------------|---------------|

MonoFlo™ Homecare das geschlossene MonoFlo™ Urindrainagesystem Geschlossen gegen Harnwegsinfektionen

Harnwegsinfektionen, die mit einem Anteil von 30 bis 40 % zu den häufigsten nosokomialen Infektionen zählen, sind in bis zu 90 % mit einem Katheter ursächlich assoziiert!

Dabei ist das Infektionsrisiko ganz wesentlich abhängig von der Art des verwendeten Harnableitungssystems. Gemäß den einschlägigen Richtlinien vom Robert-Koch-Institut dürfen nur sterile, geschlossene Ableitungssysteme zum Einsatz kommen.¹

Es konnte gezeigt werden, dass bei der Verwendung eines geschlossenen Urindrainagesystems die Rate der katheterinduzierten Infektionen um bis zu 50 % reduziert werden konnte.²



¹ Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention; Robert-Koch-Institut Berlin; Bundesgesundheitsblatt 1999; 42.S. 806-809

² Brühl; Infektionsprophylaxe in der Urologie, in: Krankenhaushygiene 1992, Steuer (Hrsg), 4. Auflage

Für die häusliche Pflege und Altenpflege

Für die sichere Handhabung gibt es eine ausführliche Gebrauchsanweisung auf der Innenseite der Sterilverpackung

MonoFlo™ das geschlossene Urindrainagesystem kann bis zu 14 Tagen am Patienten verbleiben und sollte in dieser Zeit nach Möglichkeit nicht vom Katheter getrennt werden.

| REF | Ausführung | PZN | Hilfsmittel-Nr. | Inhalt/VE |
|--|---|---------|-----------------|-----------|
| MonoFlo™ Homecare das geschlossene Urindrainagesystem mit 2000 ml Fassungsvermögen; einzeln steril verpackt | | | | |
| 2090-02 | mit 90 cm Schlauch | 2526597 | 15.25.07.0037 | 30 |
| 2120-02 | mit 120 cm Schlauch | 2526605 | 15.25.07.0037 | 30 |
| Silikon-Verbindungsstück | | | | |
| 2101-02 | zum Anschluss eines 2. Urindrainagesystems in der Nacht | 1457719 | - | 10 |

Anforderungen an ein geschlossenes Harnableitungssystem

Nach Aussage der RKI-Richtlinie sollten nur noch solche Systeme zur Anwendung kommen, „welche die hygienischen Anforderungen an die Probenentnahmestelle für bakteriologische Harnuntersuchungen, an die Rückflusssperre, das Luftausgleichsventil, den Ablassstutzen sowie an das Ablassventil erfüllen.“



Belüftete Tropfkammer

- sichere Harnableitung vom Drainageschlauch in die Tropfkammer
- Keime können nicht zurück in die Blase aufsteigen
- Der Pasteur'sche Einlauf ermöglicht einen freien Urintropfen-Fall.



Rückflusssperre

- ermöglicht einen einwandfreien Urinabfluss in den Beutel und verhindert zuverlässig Urinrückfluss aus dem Beutel in die Tropfkammer.
- die vertikale Aufhängung verhindert ein Verkleben mit der Tropfkammer



Nachtropfsicheres Ablassventil

- ergonomische Rückstecktasche für das Ablassventil
- funktionale Klemme am Ablassventil
- einhändig bedienbar

Harnröhrenolive

Harnoliven sind kleine praktische Hilfsmittel, um Substanzen aus Spritzen besser in die Harnröhre drücken zu können. Die Oliven passen auf alle Injektions-Spritzen mit Luer-Adapter, jedoch nicht auf die Gleitgespritze von PharcoPharma Instillagel, Lubrikano und Endosgel.

Die Spritze auf dem Bild gehört nicht zum Lieferumfang.




Zum Einmalgebrauch – steril verpackt

Artikel Nr.: 100 351

Harnröhren-Verschluss-Band nach Sachse

Verschlussband zur Harnröhrenkompression

Das Harnröhren-Verschlussbändchen ist eine am Penis leicht anzubringende zirkuläre Kompressions-Manschette. Durch eine weiche Kompression der Harnröhre verhindert es das Wiederaustreten von zuvor in die Harnröhre injizierten Medikamenten (Flüssigkeiten, Gele, Kontrastmittel, u. ä.) und verhindert in gleicher Weise bei einer leichten bis mittelschweren Harninkontinenz das ungewollte Ausfließen von Urin.

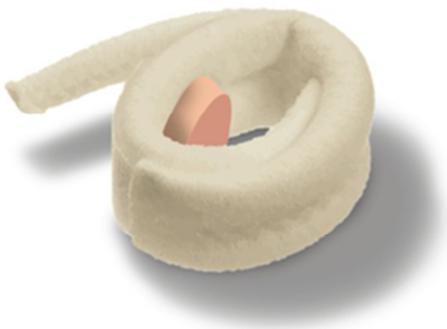

- die weiche, gepolsterte, angenehme Manschette, verursacht weniger Druckschmerz als vergleichbare Penisklemmen
- der Klettverschluss vereinfacht die Anpassung
- die Kompressionswirkung ist vom Patienten leicht zu dosieren
- geringes Gewicht und kleiner Umfang ergeben gute Trageeigenschaften beim Laufen, Sitzen, Gehen
- Einmalprodukt
- Diskret in der Anwendung.

Artikel Nr.: 57-200-00

URINALKONDOME

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihr Leben leichter und besser kontrollierbar zu machen



Für Männer mit Inkontinenz bieten wir hautfreundliche Urinalkondome in verschiedenen Basisformen und Größen:

SIMPEL – einfach anwendbar und leicht zu fixieren

BEHUTSAM – Silikon schont die besonders empfindliche Haut

EINFACH – selbstklebende Beschichtung für optimale Anpassung

SICHER – latexfrei für bessere Verträglichkeit

FLEXIBEL – überall und jederzeit anwendbar

DAMIT EINE OPTIMALE ANWENDUNG GEWÄHRLEISTET IST, GELTEN FÜR URINALKONDOME FOLGENDE QUALITÄTSANFORDERUNGEN:

- leicht anwendbare Produkte
- sehr gut verträgliche Materialien
- breites Größenangebot für perfekte Passform (bitte fragen Sie nach unserer Maßschablone)

Diese Methode zum Auffangen von Urin ist eine hautfreundliche, praktische Alternative zu Inkontinenzeinlagen und sorgt für eine bessere Kontrolle der Inkontinenz.

Wir arbeiten intensiv daran, optimale Lösungen für die Inkontinenz zu finden, die sicher, komfortabel und diskret sind.

Unser breites Angebot an Inkontinenzprodukten für den Mann stützt sich auf moderne Technologie und hohe Qualitätsstandards und ist perfekt auf den Bedarf des Anwenders abgestimmt. So können Sie sicher sein, die ideale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.



INFORMATION

Eine sichere und komfortable Alternative zu Inkontinenzeinlagen.



■ ZUVERLÄSSIGE DRAINAGE

Der knickfeste Trichter sorgt für einen sicheren Urinabfluss und reduziert das Risiko eines Urinstaus




■ SICHERE VERBINDUNG

Das flexible Material sorgt für eine sichere Verbindung des Urinalkondoms mit Bein- und Bett-Urinauffangbeuteln



■ SCHABLONE ZUR GRÖSSENBESTIMMUNG

Für eine perfekte Passgenauigkeit sind unsere Urinalkondome in verschiedenen Größen erhältlich; bitte fragen Sie nach unserer Maßschablone (Abbildung zeigt nicht die tatsächliche Größe)

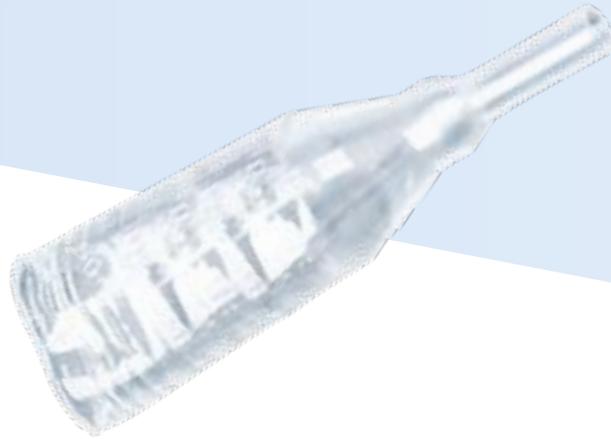

SILIKON-URINALKONDOME

Perfekte Form, sanft zur Haut

Silikon-Urinalkondome für Männer mit Inkontinenz sind besonders hautfreundlich, da sie aus atmungsaktivem latex-freiem weichem Silikon bestehen. Sie sind angenehm zu tragen und auch für Männer mit Latexallergie geeignet. Aufgrund der patentierten Beschichtung ist das Kondom selbstklebend und damit problemlos und einfach anzubringen.

Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Basisausführungen in jeweils fünf verschiedenen Größen.

ULTRAFLEX® – unser Standardurinalkondom mit normaler Klebefläche

POP-ON® – unser kurzes Urinalkondom mit nach vorn verlängerter Klebefläche von insgesamt 3,8 cm, die dazu beiträgt, ungewollten Urinabfluss und Ansammlung von Urin am Kondom zu verhindern

WIDEBAND® – unser Standardurinalkondom mit extra breiter und nach vorn verlängerter Klebefläche von insgesamt 7,6 cm, die dazu beiträgt, ungewollten Urinabfluss und Ansammlung von Urin am Kondom zu verhindern

Für eine perfekte Passgenauigkeit sind unsere Urinalkondome in verschiedenen Größen erhältlich; bitte fragen Sie nach unserer Maßschablone, um die passende Größe zu ermitteln.

SANFT – dünnes und flexibles Silikon, das sich perfekt anpasst

KOMFORTABEL – das weiche atmungsaktive Material garantiert ein hohes Maß an Komfort, auch bei besonders empfindlicher Haut

BEHUTSAM – Silikon schont die besonders sensible Haut

SICHER – der flexible Trichter ist knickfest, sichert dadurch einen guten Urinabfluss und reduziert die Möglichkeit eines Urinstaus. Das transparente Kondom ermöglicht die optische Kontrolle der Haut

EINFACH – selbstklebende Beschichtung für optimale Anpassung

KOMPLETT – erhältlich in 5 verschiedenen Größen und in jeweils 3 verschiedenen Ausführungen (Ultraflex, Pop-On, Wideband)



ANWENDUNGSBESCHREIBUNG *

- 1 Platzieren Sie das Kondom auf der Penisspitze, ohne die Vorhaut zurückzuschieben.



- 2 Entrollen Sie das Kondom langsam und gleichmäßig. Achten Sie darauf, genügend Platz zwischen dem Trichter des Urinalkondoms und der Penisspitze zu lassen. Faltenbildung im Klebbereich sollte vermieden werden.



- 3 Befestigen Sie einen Urinauffangbeutel am Urinalkondom. Das Urinalkondom sollte mindestens alle 24 Stunden gewechselt werden.



Entfernen des Urinalkondoms: Trennen Sie den Urinbeutel vom Urinalkondom. Rollen Sie das Kondom vorsichtig vom Penis ab (in Richtung Penisspitze). Verwenden Sie gegebenenfalls eine feuchte Kompresse, um die selbstklebende Beschichtung des Kondoms zu lösen.

ULTRAFLEX

100 % SILIKON, SELBSTKLEBEND, ATMUNGSAKTIV, DURCHSICHTIG, MAX. KLEBEFLÄCHE 4,5 CM, LÄNGE 14,5 CM

| DURCHMESSER | ART. NR. | PZN | HMV-NR | VE |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|
| 25 mm | 33301 | 0753261 6 | 15.25.04.7020 | 30 |
| 29 mm | 33302 | 0753262 2 | 15.25.04.7020 | |
| 32 mm | 33303 | 0753264 5 | 15.25.04.7020 | |
| 36 mm | 33304 | 0753263 9 | 15.25.04.7020 | |
| 41 mm | 33305 | 0753265 1 | 15.25.04.7020 | |

POP-ON

100 % SILIKON, SELBSTKLEBEND, ATMUNGSAKTIV, DURCHSICHTIG, MAX. KLEBEFLÄCHE 3,8 CM, LÄNGE 10 CM

| DURCHMESSER | ART. NR. | PZN | HMV-NR | VE |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|
| 25 mm | 32301 | 0753255 6 | 15.25.04.7021 | 30 |
| 29 mm | 32302 | 0753256 2 | 15.25.04.7021 | |
| 32 mm | 32303 | 0753257 9 | 15.25.04.7021 | |
| 36 mm | 32304 | 0753258 5 | 15.25.04.7021 | |
| 41 mm | 32305 | 0753259 1 | 15.25.04.7021 | |

WIDEBAND

100 % SILIKON, SELBSTKLEBEND, ATMUNGSAKTIV, DURCHSICHTIG, MAX. KLEBEFLÄCHE 7,6 CM, LÄNGE 14,5 CM

| DURCHMESSER | ART. NR. | PZN | HMV-NR | VE |
|-------------|----------|-----------|---------------|----|
| 25 mm | 36301 | 0753266 8 | 15.25.04.7008 | 30 |
| 29 mm | 36302 | 0753267 4 | 15.25.04.7008 | |
| 32 mm | 36303 | 0753268 0 | 15.25.04.7008 | |
| 36 mm | 36304 | 0753270 5 | 15.25.04.7008 | |
| 41 mm | 36305 | 0753272 8 | 15.25.04.7008 | |

*Die vorliegenden Informationen sind kein Ersatz für einen Arztbesuch und das aufmerksame Lesen der Gebrauchsanweisung.

TUR - Schlauchsysteme

TUR-Zulauf Schlauchsystem



Silikonschlauch Ø 6x9 mm



Male LL-Ansatz

Artikel Nr.: SSR 02 VE - 25 Stück TUR-Zulaufschlauch 145 mm, einzeln steril verpackt

TUR-Ablaufschlauchsystem



Silikonschlauch Ø 8x13 mm

Artikel Nr.: SSR 02 VE - 25 Stück TUR-Ablaufschlauch 145 mm, einzeln steril verpackt