

Pasten & Gele Programm

dengg
Medizintechnik

Franz-Fischer-Strasse 4
6020 Innsbruck

Tel. +43 (0) 512-308 308

office@dengg-med.at
www.dengg-med.at



PASTEN & GELE - Wertvolle Informationen



- Bei der Anwendung von Pasten und Gelen sollten Sie, wie bei allen von Ihnen verwendeten Produkten, darauf achten, dass diese der Zweckbestimmung entsprechen und CE- gekennzeichnet sind. (Siehe Anwenderschutzverordnung "MPG")
- Überzeugen Sie sich vor der Anwendung, dass Ihre Produkte für den gewünschten Einsatz hergestellt wurden.
- Vorsicht bei Mixpräparaten! Zu hoher Salzgehalt kann für das Elektrodenmaterial zu aggressiv sein und deren Lebensdauer verkürzen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei der herkömmlichen Vorgehensweise zu verbleiben und die Haut mit einer speziell dafür vorgesehenen Emulsion zu reinigen sowie im Anschluss ein spezielles Leitgel/Leitcreme oder eine Haftpaste zu verwenden.

VERLASSEN SIE SICH AUF UNS.

Alle von GVB-geliMED angebotenen Produkte sind aufeinander abgestimmt, so dass bei jeglicher Verwendung dieser Präparate, auch miteinander, keinerlei Risiken entstehen. GVB-geliMED garantiert auch, dass durch die Verwendung der angebotenen Präparate die Elektrodenmaterialien nicht über das Normalmaß - sprich, den normalen Verschleißerscheinungen - hinaus strapaziert bzw. in Mitleidenschaft gezogen werden.

NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN



NUPREP

Modernes Hautvorbereitungsgel, welches speziell für empfindliche Haut empfohlen wird.

Es entstehen keine Hautirritationen und ist angenehm für den Patienten.

SKIN PURE



Hautvorbereitungspaste mit abrasiver Wirkung.

PASTEN & GELE - Kleben und Haften

NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

EC2

Speziell entwickelte Klebeleitpaste mit ausgezeichneter Haftwirkung. In Kombination mit unserer Gold CUP Elektrode ist diese Paste ideal für Langzeitableitungen.



TEN20



Die neurodiagnostische Kontaktpaste, die nicht eintrocknet. Kein Klumpen, kein 2. Auftragen erforderlich, abwaschbar, leicht zu reinigen, keine Rückstände.

NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

AC CREAM



AC-Cream ist eine stark haftende, leitende Kontaktcreme. Sie ist weiß, transparent und wasserlöslich mit einem PH-Wert von 6,6 bis 7,0.

ELEFIX



Klebeleitpaste zur Verwendung für EEG und EP-Ableitungen.

PASTEN & GELE - Leiten

NEURO.FLUID!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

SIGNA GEL



Mehrzweckelektrolyt mit hoher Leitfähigkeit entspricht allen Anforderungen eines hervorragenden Salz-Elektrodengels. Zudem ist es bakteriostatisch und hypoallergen. Empfohlen für EKG und EMG. Keine haftende Wirkung

HELLIGE ELEKTRODEN GEL

EEG - EKG Kontaktgel für Langzeitableitungen. Dabei ist das Gel nicht fettend und feuchtigkeitsstabilisierend. Keine haftende Wirkung.



SPECTRA GEL



Salzfreies Elektrodengel zur Verwendung bei EEG / EP.

NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

ECI Elektrodengel



NEURGEL

Neurgel ist ein elastisches, hoch leitfähiges, salzhaltiges und wasserlösliches Gel mit einem PH Wert von 6 bis 7, das besonders für EEG, EMG, EP-Ableitungen konzipiert wurde.



Electrolytgel ist speziell für die Ableitung mit verschiedenen Elektrodenhauben konzipiert worden, um eine bestmögliche Reduzierung des Elektrodenwiderstandes zu gewährleisten.

PASTEN & GELE - Leiten

NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

SYNAPSE

Für die NASA entwickelte EEG-Kontaktcreme, speziell für Routineuntersuchungen und Langzeitüberwachungen.



HELLIGE CREME



EEG-Kontaktcreme zur Reduktion von Hautübergangswiderständen. Keine haftende Wirkung.

SIGNA CREME

EEG-und EKG-Kontaktcreme für Langzeitableitungen. Keine haftende Wirkung.



NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN



SIGNA SPRAY

Elektrolytspray zur Hautvorbereitung.
Bakteriostatisch, hypoallergen,
keine Rückstandsbildung.

REMOVER für Collodion


Der acetonfreie Collodion-Entferner
ist auch für empfindliche Haut gut
verträglich. Er enthält auch sonst
keine toxischen Substanzen und
ist wasserlöslich.



NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

Collodion

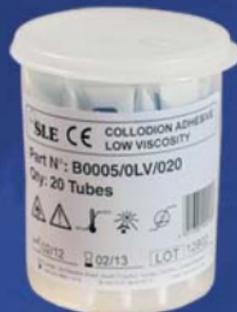

Spezial Langzeit-Elektrodenkleber.
In Verbindung mit unserer Kontaktleitcreme "Synapse"
oder dem Elektrolytgel "neurgel". Collodion eignet sich
besonders gut für Langzeitableitungen, die sich über
mehrere Tage erstrecken können.

Die Druckluftpistole (Elektrodenapplikator) wurde speziell für das Auftragen von "Collodion" oder anderen ähnlichen Haftstoffen auf Cup-Elektroden konstruiert. Ihre auswechselbare Spitze passt exakt in die Elektrodenöffnung. Die Applikatorpistole wurde für die Arbeit mit Niederdruck (max. 0,6 Bar/ 10 PSI Einlass-Luftdruck) entwickelt.

Jetzt auch mit Ein/Aus-Schalter und Spritzschutzgehäuse



NEURO.FLUID.

PASTEN - GELE - EMULSIONEN



Aquasonic 100

AQUASONIC 100 ist weltweit der Maßstab für Ultraschallgel und wird für alle diagnostischen und therapeutischen Ultraschalluntersuchungen empfohlen, bei denen viskoses Gel erforderlich ist.

Eigenschaften

Akkustisch korrekt für den beim medizinischen Ultraschall angewendeten breiten Frequenzbereich
Nicht reizend, hypoallergen.
Hinterlässt keine Flecken auf Kleidung und verursacht keine Schäden am Gerät.



NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

GIGASEPT



Desinfektionsflüssigkeit mit Reinigungswirkung.

IVORY Waschlotion für Systemhauben



! Spezielle Reinigungsemulsion, die im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln keine Rückstände hinterlässt.

NEURO.FLUID.!

PASTEN - GELE - EMULSIONEN

REINIGUNGSBÜRSTEN & WATTSTÄBCHEN



Bürsten und extra lange Wattestäbchen zur schonenden Reinigung Ihrer Elektroden

HOLZSTÄBCHEN



Holzstäbchen mit spitzer und flacher Seite

GELSPRITZE UND STUMPFE NADELN



Zum einfachen Umgang mit Kontaktgel zur Reduzierung von Impedanzen.

PRODUKTINFORMATIONEN - Testbericht über CT-taugliche Pasten und Gele

Aufgrund häufiger Anfragen haben wir die CT-Tauglichkeit unserer Pasten und Gele in ausführlichen Tests feststellen lassen.

Diese Ergebnisse möchten wir Ihnen hier zur Verfügung stellen:



Ten20
Klebeleitpaste

nicht sichtbar,
keine Artefakte



ELEFIX
Klebeleitpaste

sichtbar,
keine Artefakte



SYNAPSE
Klebeleitcreme

sichtbar,
keine Artefakte



NEURGEL
salzhaltiges Leitgel

ungeeignet,
Artefakte



AC-CREAM
Klebeleitpaste

sichtbar,
keine Artefakte



EC-2
Klebeleitpaste

ungeeignet,
Artefakte

dengg
Medizintechnik

Franz-Fischer-Strasse 4
6020 Innsbruck

Tel. +43 (0) 512 - 308 308

office@dengg-med.at
www.dengg-med.at

WIR SEHEN UNS...
... EUER MATS

